

iX Auto



Be well, Live well
Wellell

睡眠の質を高めるための CPAP療法体験の改善



CPAP療法の複雑さを簡素化し、ユーザーの体験や長期的なアドヒアランスを向上させます。

- ・ 診断と圧力調整の自動化
- ・ 快適さをパーソナライズ
- ・ 外出先でも高い睡眠品質を楽しめる
- ・ コンパクトかつ軽量設計




圧力変動アルゴリズム

呼吸開始時に圧力を下げその後所定の圧力に戻すことで治療圧を患者の呼吸に合わせます。



リーク補正

リークによる空気圧の損失を計算し圧力供給する際に自動的に補正します。

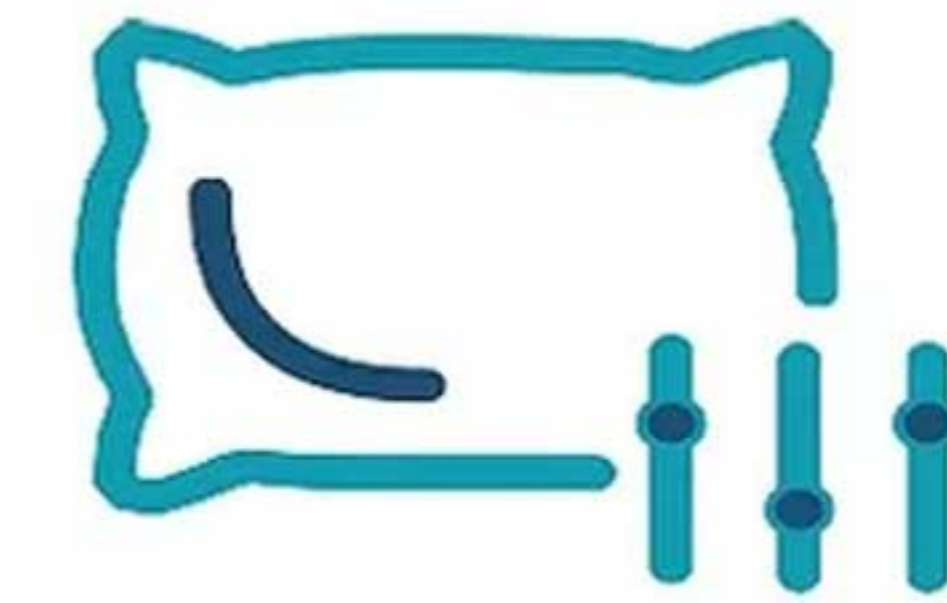

フローリミテーション

フローリミテーションを検出し圧力を自動調整します。



中枢性睡眠時無呼吸の検出

閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA) と中枢性睡眠時無呼吸 (CSA) を検出しそれに応じて圧力を供給します。



オートON/OFF

呼吸を検知すると治療が開始されマスクを外すと治療を終了します。



コンパクトな加温加湿器

組み立て簡単な加温加湿器と結露対策の加温チューブを選択することが可能です。

SleepWell

CPAP患者のケア管理とセルフモニタリングの簡素化
治療開始時の体験と長期的なアドヒアランスの向上

SleepWell Track: ウェブモニタリングシステム


SleepWell Reader: オフライン用モニタリングシステム



患者及び装置の管理を
簡単に行えます。



用途に応じて4種類の
レポートを出力できます。

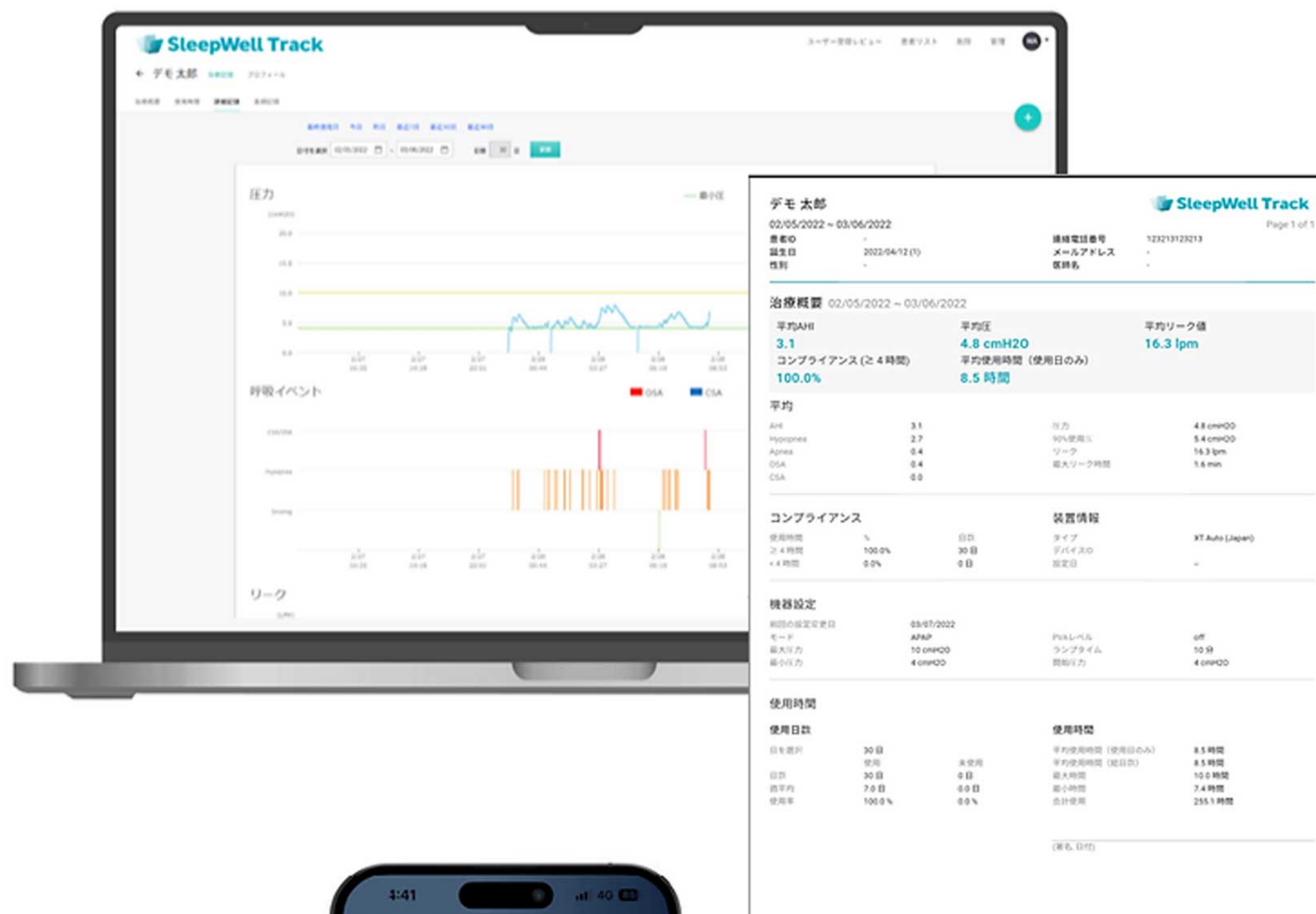

SleepWell App: 患者用モニタリングシステム



使用時間やリークなどをもとに
1日の睡眠をスコアリングをすることで
患者様が治療効果を自己評価できます。



仕様

■iX Auto

電源	100-240 V, 50/60 Hz ユニバーサル電源
寸法	W14.1 x D14.5 X H10.9 cm
重量	900 g
圧設定範囲	4.0 - 20.0 cm H ₂ O (0.2cmH ₂ O 毎に設定可)
ランプ時間	0 - 45分 (5分毎に設定可)
作動音	28dBA以下
ダウンロード方法	SDカード / USBケーブル
医療機器クラス	Type BF、クラスII、IP22

■iX Auto 標準構成

アダプター、AC電源コード、ライトグレーチューブ (15 mm) 、キャリングバッグ、ウルトラフィルター、取扱説明書、SDカード

■iX Auto Humidifier 加温加湿器

電源	100-240 V, 50/60 Hz ユニバーサル電源
寸法	W11.5 x D14.2 X H14.7 cm
重量	590 g
容量	300 ml
加温出力	≥ 12 mgH ² O/L
最大ヒータープレート温度	70°C